

KURZ UND  
KOMPAKT



# ALL HIGH DEFINITION MIT JEDEM RÖNTGENBILD

Sedecal Röntgenanlage

PRODUKTBROSCHÜRE

DIGITALES  
RÖNTGEN



## Sedecal Röntgenanlage

GENERATOR	
max. mA	400 mA
max. kVp	125 kVp
max. Leistung kW	32 kW
max. wählbarer mA bei max. kVP	250 mA
max. wählbarer kVp bei max. mA	80 kVp
RÖNTGENPARAMETER	
kV	Von 40 kVp auf 125 kVp in Schritten von 1 kV
mA	Von 10 mA auf 400 mA über die folgenden mA-Stufen: 10, 12,5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400
mAs	Produkt von mA x Zeitwerte von 0,1 mAs bis 500 mAs
Größe	Höhe: 200 cm, Tiefe: 110 cm, Breite: je nach Tischplatte 150 / 180 / 200 cm



Ihr Produktspezialist



scil animal care company GmbH

info-de@scilvet.com  
[www.scilvet.de](http://www.scilvet.de)  
Dina-Weissmann-Allee 6  
D-68519 Viernheim  
Tel.: +49 (0) 6204 7890 - 0  
Fax: +49 (0) 6204 7890 - 200

VERS.:DEU202030321

# ALL HIGH DEFINITION MIT JEDEM RÖNTGENBILD

Die Sedecal Röntgenanlage bietet alle Vorteile eines Hochfrequenzgenerators, einschließlich niedrigerer Patientendosis, kürzerer Aufnahmezeiten und höherer Genauigkeit und Konsistenz.

Der Generator wird von mehreren Mikroprozessoren gesteuert, was eine höhere Aufnahmekonsistenz, einen effizienten Betrieb und eine längere Röhrenlebensdauer gewährleistet. Die sehr detaillierte Eigendiagnose verbessert die Wartungsfähigkeit.

## Hochauflösende Kombination mit cuatro DR<sup>HD</sup>!

Kombinieren Sie die Sedecal Röntgenanlage mit den cuatro DR<sup>HD</sup> Detektoren, hergestellt vom führenden Anbieter tiermedizinischer digitaler Röntgenlösungen. Das Team aus Entwicklern und Tierärzten bei Cuattro arbeitet seit mehr als 20 Jahren nur für ein Ziel: das beste Röntgenerlebnis für Tierärzte.


Innovativ, schnell, effektiv, sicher und noch brillanter - die Sedecal Röntgenanlage erfüllt den höchsten Standard in der tiermedizinischen Röntgendiagnostik.

## STARKSTROM

- Sedecal Röntgenanlage
- Entfernbare Rasterschublade
- 150 cm / 180 cm / 200 cm breite Tischplatte
- Streustrahlenraster Aluminium, 40 Linien / cm; Verhältnis 8:1
- Fußschalter
- Installation, Montage und Transport
- 2 Jahre Garantie

Sedecal Röntgenanlage  
inkl. Toshiba E7239X Röntgenröhre  
mit 1,0 / 2,0 mm Fokus

Sedecal Röntgenanlage  
inkl. Toshiba E7242X Röntgenröhre  
mit 0,6 / 1,5 mm Fokus

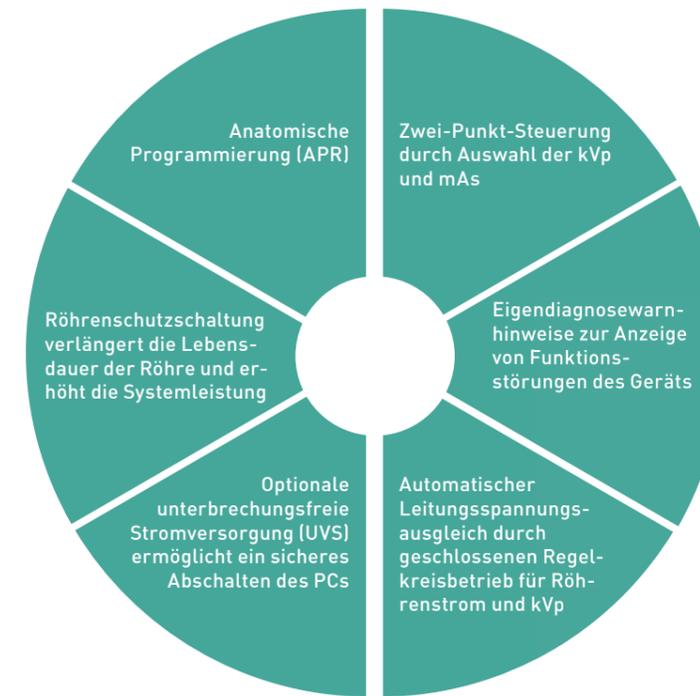

## LICHTSTROM

- Sedecal Röntgenanlage
- Entfernbare Rasterschublade
- 150 cm / 180 cm / 200 cm breite Tischplatte
- Streustrahlenraster Aluminium, 40 Linien/cm; Verhältnis 8:1
- Fußschalter
- Installation, Montage und Transport
- 2 Jahre Garantie

Sedecal Röntgenanlage  
inkl. Toshiba E7239X Röntgenröhre  
mit 1,0 / 2,0 mm Fokus

Sedecal Röntgenanlage  
inkl. Toshiba E7242X Röntgenröhre  
mit 0,6 / 1,5 mm Fokus